

JAY[®]

X2[™] クッション

- ≡ 軽量、薄型でも
アクティブ ユーザーの皮膚を守ります



JAY® X2™ クッション

≡ Jay X2 クッションは、アクティブユーザーのために設計された軽量でメンテナンスもいらぬ薄型のフルイドクッションです。安定性と圧の緩和を促します。X2 クッションには Jay エクストリームクッションとアクティブクッションの要素を使っており、長年かけて有効性が実証されている JAY の設計と最新の技術の両方を駆使しています。

軽量、安定性の高い薄型フォームベース

- ・クッションの高さが 2.25" しかないので、座面高に大きく影響することなくサポートすることが出来ます
- ・日常の仕事や活動の際に、クッションの前方に座っても快適な平らなベース
- ・さらに尾骨を守るノッチ カットアウト（切り込み）
- ・1" 外転防止サポート（無料オプション）はアクティブユーザーをより強くサポートします




メンテナンスフリーの JAY Flow™ フルイドインサート

- ・JAY Flow™ フルイド インサートは 1 人 1 人に適し適切なフルイドの位置にするので、皮膚を床ずれから守ります
- ・ゼロ - メンテナンス設計がクッションの寿命を通じて皮膚をしっかりと守ります



JAY の革新的な 2 層カバー技術

- ・ストレッチ外カバーのジッパーが隠れる安全な設計
- ・AquaGuard®（アクアガード）ジッパー付きの縫糸からも水分が染みこまない防水加工された内カバーの設計が、フォームベースに湿気がこもるのを防ぎます

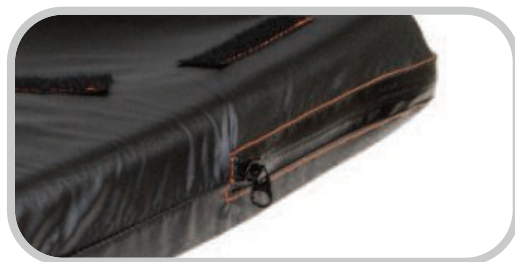

仕様	
皮膚の完全性の保護（最大スコア 5）	3.5
ずれ防止（最大スコア 5）	4
安定性（最大スコア 5）	4
ポジショニング（最大スコア 5）	4
長時間の座位に対する耐性（最大スコア 5）	3.5
耐荷重	136kg
重量	1.72kg（16"×16"の場合）
クッション幅	12"～20"（36～51cm）
クッション奥行	10"～20"（25～51cm）
クッション高さ	2.25"（5.7cm）
外カバー	ストレッチ
保証期間	ベース 2 年、カバー 6 か月

価格：49,600 円（税抜）～



サンライズメディカルジャパン株式会社 Sunrise Medical Japan Co., Ltd.
〒349-1145 埼玉県加須市間口 456 番地 1 TEL:0480-31-6480 FAX:0480-31-6481
E-mail:info@sunrisemedical.jp Web:http://sunrisemedical-japan.jp/